

# SÉMINAIRE



# ARLoD

# 2024

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE MONSIEUR FRÉDÉRIC VALLETOUX  
MINISTRE DÉLÉGUÉ EN CHARGE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION



MINISTÈRE  
CHARGÉ DE LA SANTÉ  
ET DE LA PRÉVENTION

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Association pour le Recensement  
et la Localisation des Défibrillateurs  
**ARLoD**

## LES DAEs SONT-ILS FONCTIONNELS ?


Jean-Louis COULON

Président MATECIR DEFIBRIL

Président CIRCODEF

# Parc DAE France au 01/01/2024

Hors hôpitaux, cliniques, S-P, Services de 1ers secours  
Données officielles (+/- 5%)

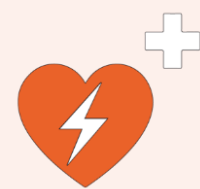


Situation parc DAE France 31/12/2023			
	Période	Nbre DAE installés	Nombre acteurs
Mai 2007 : loi	2007- 2012	70 000	50
	2013-2018	150 000	100
LOI ERP	2019-2022	230 000	320
	dont 5% remplacement		
	2023	40 000	320
dont 10% remplacement			
<b>Situation 01/01/2024</b>		<b>474 500</b>	
<b>Projection avec MDR 05/2024</b>			
Décembre 2024			250
Décembre 2025			150

> **80%** des acteurs de la distribution (vente/location) non conformes au Code de la Santé Publique (Art L1142-2) qui exige une assurance RC PRO pour la vente, la location et la maintenance de DM.

# Parc DAE France maintenu au 01/01/2024

Hors hôpitaux, cliniques, S-P, Services de 1ers secours  
Données officieuses (+/- 5%)

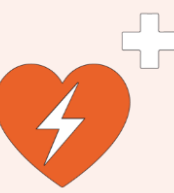


Situation parc maintenu			
	Sociétés	DAE maintenus	% Parc
Sociétés > 20 salariés	3	160 000	33,72%
Sociétés 3-19 salariés	10	45 000	9,48%
Sociétés <3 salariés	150	30 000	6,32%
		<b>235 000</b>	<b>49,5%</b>

> **90%** des acteurs de la distribution (vente/location) non conformes au Code de la Santé Publique, Art L1142-2, qui exige une assurance RC PRO pour la vente, la location et la maintenance de DM.

→ Prestataire non assuré ou qui sous-traite à auto-entrepreneur ou association de formation sans RC PRO


# Taux de dysfonctionnement constaté lors de l'audit préalable à une prestation de maintenance

(Données Matecir Defibril officielles)

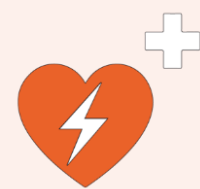

**MATECIR DEFIBRIL maintient 23 000 DAE**


<b>Audits / DAE occasion 2021-2023</b>		
<b>Nbre DAE audités</b>	<b>6 021</b>	<b>%</b>
R.A.S	2 463	40,91%
Consommables périmés	1 949	32,37%
Mauvais stockage	479	7,96%
Matérovigilance rappel électrodes	472	7,84%
Matérovigilance rappel DAE	228	3,79%
Consommables non conformes	212	3,52%
Pile sauvegarde périmée	218	3,62%

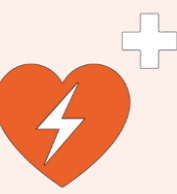

- Pile située à l'intérieur du DAE
- 4 questions :
  - Existence d'une pile interne ?
  - Rôle de cette pile interne ?
  - Durée de vie ?
  - Possibilité de remplacement ?


# Pile interne (pile sauvegarde / pile bouton / pile mémoire)

## Un danger imminent

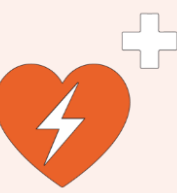

- 14 principaux DAE / 12 fabricants représentés en France
  - 5 sans pile interne
  - 9 avec pile interne
- Avec pile interne :
  - 1 seul fabricant (Schiller) donne clairement des indications dans la notice technique : existence, durée de vie de 6 ans, remplacement possible
  - 3 fabricants
    - durée de vie de 8 à 10 ans
    - aucune indication préalable
    - impossibilité de remplacement

**Obsolescence programmée ?**

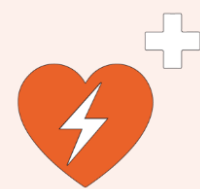


## Taux d'utilisation des DAE

(données officielles MATECIR DEFIBRIL)

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Nbre DAE maintenus	17 039	19 202	22 400
Nbre utilisations	194	265	319
Taux utilisation	1,139%	1,380%	1,424%

**Durée de vie de 10 ans → taux d'utilisation de 14,24%**  
**→ 1 DAE sur 7 sera utilisé**

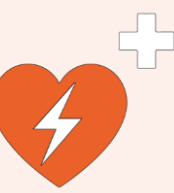

## Projection 2025 du nombre d'utilisation DAE

	Nbre DAE	Taux U.T	Nbre U.T
Parc France	500 000	1,6%	8 000

**Combien de DAEs ne seront pas fonctionnels ?**